

Orto-Medic


30 años a su servicio



Respaldo Jay3



NUEVO

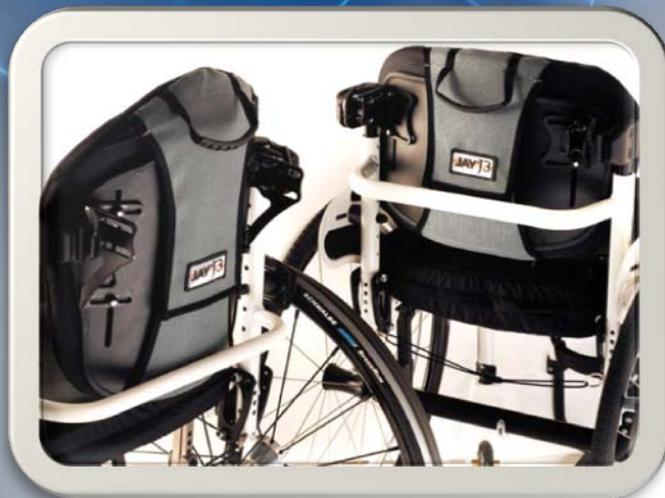

56-02 2698090-2698089

www.ortomedic.cl

Julio Prado 1665, Santiago.

Amplia gama de formas, tamaños y tallas.

La gama de respaldos JAY 3 presenta una amplia variedad de formas y tamaños. De esta manera se ofrece un soporte óptimo a todos los usuarios. El nuevo respaldo JAY3 permite seleccionar 3 tipos de profundidad de contorno dependiendo de cuanto soporte lateral necesita el usuario, 4 niveles de soporte según su estabilidad de tronco, 3 alturas de respaldo y una gran variedad de anchuras. ¡Hasta 64 respaldos diferentes!



Altura hombros
(Standard / Profundo)



Torácico superior
(Standand / Profundo)



Torácico medio
(Standard)




Torácico inferior
(Standard)



Accesorios de Posicionamiento para alineación vertebral

Un respaldo rígido debe adaptarse totalmente a la forma del usuario con el fin de obtener: una distribución óptima de la presión, un soporte correcto, aumentar el confort y la funcionalidad. Por esta razón, el respaldo Jay3 ofrece una gran variedad de cuñas de posicionamiento que permiten a los profesionales la adaptación total del respaldo al usuario.

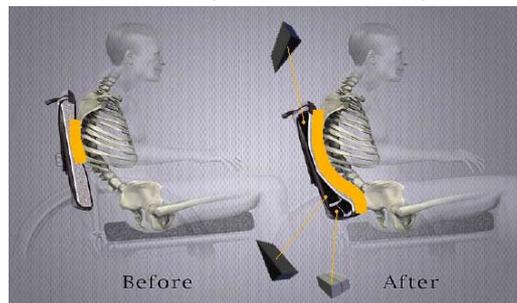

Fácil de colocar y retirar por el usuario.

Para montar el respaldo simplemente hay que deslizarlo en los anclajes y automáticamente se fija; para desmontar es presionar los seguros y tirar hacia arriba.



Compatible con 90% de las sillas existentes en el mercado.

El sistema de anclaje Jay 3 presenta un revolucionario diseño de abrazadera compatible con una gran variedad de diámetros de tubo (desde 1,9 cm hasta 2,8 cm). Con sólo dos puntos de anclaje, se puede colocar en múltiples posiciones del tubo del respaldo. Además es ajustable en anchura hasta 5 cm y en ángulo hasta 22° sin reducir la profundidad del asiento.



56-02 2698090-2698089

www.ortomedic.cl

Julio Prado 1665, Santiago.