

Orto - Medic
www.ortomedic.cl

Rueda frontal
Todo terreno,
Para silla de ruedas
Modelo FreeWheel



Características del producto.

Si usted tiene un marco rígido o una silla de ruedas plegable (requiere accesorio opcional), la FreeWheel es tu boleto para desplazarte con seguridad y rápidamente sobre cualquier tipo de terreno.

Pastelones, caminos de tierra, pasto, gravilla, nieve y arena ya no son un obstáculo. Con el FreeWheel las ruedas delanteras de tu silla se levantan del suelo convirtiéndose en un triciclo-silla todo terreno.

FreeWheel es de fácil montaje y desmonte, con un sistema de anclaje para ser colgada en respaldo cuando no se esté ocupando.

Descripción

Tipo de Rueda y estructura

Rueda de 12 ½" x 2 ¼" inflable con válvula de rueda de automóvil.
Posee una estructura de aluminio de alta resistencia



Rápido montaje

El sistema de montaje se compone de una abrazadera de palanca que sujeta a la plataforma de apoyapiés, en el caso de silla de chasis rígidos, y en el caso de silla plegable, al adaptador para silla plegable.




Adaptador para
silla plegable



Will it fit?

Yes!

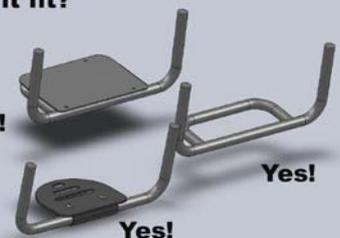

Yes!

Yes!


Sistema para transporte

El sistema para transporte se compone de una abrazadera con un vástago que permite la sujeción tras el respaldo para cuando no se requiera ocupar.



Accesorios (se venden por separado)

Adaptador para silla plegable

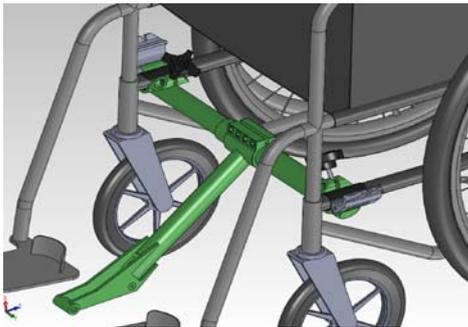

Porta Equipaje



Especificaciones

Peso: 2,2 kg

Dimensiones: 61cm de largo x30cm de altura

Marco: Aluminio aeronáutico

Neumático: 12 1/2" x 2 1/4"

Compatibilidad: Sólo con sillas de ruedas manuales de chasis rígido y silla plegable (con adaptador).

WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 22698090 – 22698089
Stgo. - Chile