

**Orto - Medic**  
www.ortomedic.cl

## Silla de Baño y ducha

Modelo A538

**Nueva**



### Características del producto.

Esta silla de procedencia Española, fabricada en Aluminio y plástico ideal para ducha. Sus apoyabrazos se abaten para trasladarse a la silla desde cualquiera de sus lados, además de sus apoyapiés graduables en altura, abatibles hacia los costados y desmontables. Posee ruedas traseras en aro 24" **desmontables** con freno, para desplazarse de forma independiente.

Puede ser utilizada para el traslado de dentro de casa, también como un baño portátil en el cuarto, o una silla para ducharse.

## Beneficios del producto.

### Brazos abatibles.

Los brazos se abaten hacia arriba con el fin de liberar el acceso lateral, para una transferencia más cómoda.



### Apoyapiés abatibles y desmontables.

Los apoyapiés se abaten hacia los lados para acercarse a un lugar en espacio reducido. También se desmontan para transporte y finalmente la plataforma de pies es graduable en altura.



## Ruedas traseras en un aro de 24" con freno.

A todas las ventajas que posee esta se suma la independencia que proporcionan sus ruedas traseras en aro 24", permitiendo la autopropulsión por parte del usuario (como lo son las sillas de ruedas tradicionales).

Como un adicional a las ventajas de la autopropulsión, sus ruedas traseras poseen un eje de desmonte rápido para poder sacarlas sin necesidad de herramientas.




## Un baño escondido en la silla.

A demás esta silla dispone de un balde con tapa permitiendo utilizar la silla como un inodoro portátil que puede ser usado en la comodidad de una habitación sin necesidad de ir al baño. Su plataforma de asiento con forma de herradura deja un libre acceso en la zona frontal tanto para aseo como para baño.



## Altura de asiento graduable.

En la búsqueda de una buena posición y estabilidad al sentarse, el asiento ofrece la posibilidad ajustar su altura e inclusive dar una pequeña pendiente hacia atrás evitando de esta manera el deslizamiento hacia delante del paciente a través del asiento.

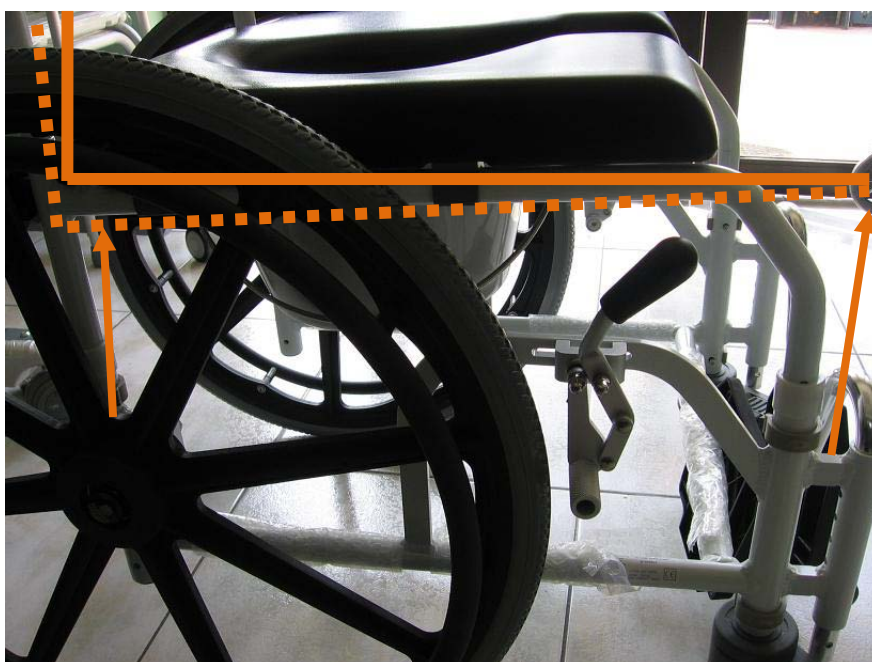

## Especificaciones Técnicas

Respaldo	43,5 x 21,5 cm	Altura total	96,5 cm
Asiento	43 x 42 cm	Altura de asiento	54 cm
Anchura	60 cm	Distancia asiento-reposabrazos	17,5 cm
Longitud	110,5 cm	Peso máximo de usuario	120 kg

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)  
Julio Prado # 1665  
Fono: 22698090 - 22698089  
Stgo. - Chile