

Silla Neurológica Clematis



Características del producto.

Silla postural con sistema de basculación y reclinado con bombines hidráulicos que suavizan el movimiento de los cambios de posición de seating (conjunto asiento y respaldo).

Beneficio del Producto

Asiento Basculante

El asiento permite una basculación entre -1° y 19° , para realizar cambios posturales con el propósito de favorecer la reducción de la presión y la prevención de escaras.



Respaldo Reclinable

El sistema permite ajustar la reclinación del respaldo entre -1° y 32°



Profundidad de asiento ajustable

La profundidad del asiento se regula muy fácilmente entre 42 y 48cm.




Respaldo y asas de empuje regulables

El respaldo es ajustable en altura conforme a la necesidad de la persona. Las asas de empuje también son regulables en altura fácilmente aflojando dos pomos, de acuerdo a la altura del acompañante.




Cabezal ajustable y acolchado

El Cabezal que posee la silla es anatómico y totalmente acolchado, desmontable y su soporte articulable de tres zonas permite un ajuste óptimo a la fisionomía del usuario.

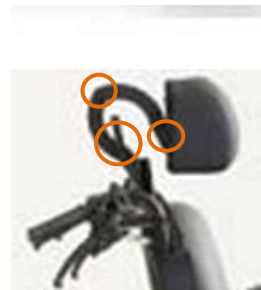

Reposapiés elevables

Los reposapiés son desmontables, y además son elevables, permitiendo graduar el ángulo de flexión de los pies hasta dejarlos completamente extendidos hacia el frente. Además las plataformas reposapiés son graduables en ángulo y profundidad.

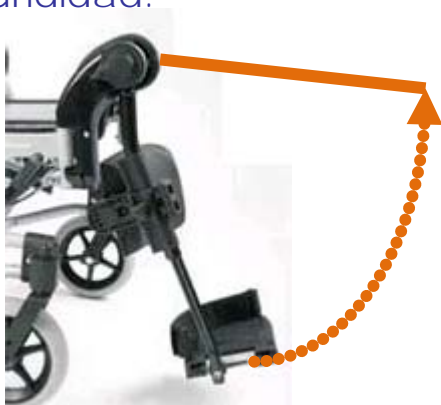

Topes Antivuelco

Posee topes antivuelco regulables en altura.



Reposabrazos Regulables

Los reposabrazos son ajustables en altura, y con una almohadilla alargada para no perder la postura de brazos al reclinar el respaldo.



Accesorios (Se venden por separados)

Soportes de Tronco ajustables

Soportes de tronco regulables en anchura y altura. Además son desmontables para no interferir en las transferencias.



Cuña abductora

La silla dispone (como accesorio adicional) de un separador de piernas desmontable.



Dimensiones y Especificaciones Técnicas.



39, 44, 49 cm
+ 2 cm con ensanchadores
(opcionales)



42 - 48 cm



40 - 45 cm*1



60 - 71 cm*1,2



96 - 112 cm*2



112 - 148 cm



-1° - +30°



max. 125 kg



23 - 34 cm*1



30 - 43 cm



-1° - +19°



Ancho de asiento
+ 21 cm (rueda pequeña)
+ 24 cm (rueda grande)



Peso de transporte
20,5 / 21 / 21,5 kg*3



30 / 32 / 33,5 kg



Dimensiones de
transporte (silla plegada)*4



*1 : Sin cojín de asiento - Distancia placa de asiento - suelo

*2 : Sin reposacabeza ni puños

*3: Sin ruedas traseras, reposacabeza, reposabrazos, soportes de tronco, ni cojín de asiento

*4: Ancho 39 (Altura : 59,5 X Prof: 84 X ancho 58,5 cm)

Ancho 44 (Altura : 59,5 X Prof: 84 X ancho 63,5 cm)

Ancho 49 (Altura : 59,5 X Prof: 84 X ancho 68,5 cm)

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile