

Scooter Eléctrico

Sapphire 2



Características del producto.

Es un Scooter de gran estabilidad, ideal para todo tipo de terreno. Sus cuatro ruedas son inflables para una mejor amortiguación ante las diferencias del terreno. Además es desarmable de manera sencilla y rápida, de tal forma que puede ser transportado en un vehículo. Posee luces delanteras y traseras para desplazamientos nocturnos.

Beneficio del Producto

Desarmable.

El Scooter permite desarmarlo de manera fácil sin necesidad de herramientas, de esta forma se puede transportar en un vehículo para un viaje de larga distancia.



Asiento cómodo y ajustable.

El asiento gira en 90ª para que la persona se pueda subir al Scooter por donde mas le acomode. Su respaldo plegable reduce el espacio para su desmontaje y traslado. Sus brazos son abatibles (para facilitar el sentarse en el scooter) y regulables en anchura (de acuerdo a la contextura del usuario).




Sistema de luces.

Para desplazamientos nocturnos, el scooter se encuentra equipado con un juego de luces, tanto delanteras (para una mejor visión nocturna del terreno), como traseras (para ser visto por quienes van tras el scooter).



Amplio espacio de apoyapies.

El scooter posee una plataforma para el apoyo de los pies muy amplia y cómoda, con una goma antideslizante para mayor seguridad.

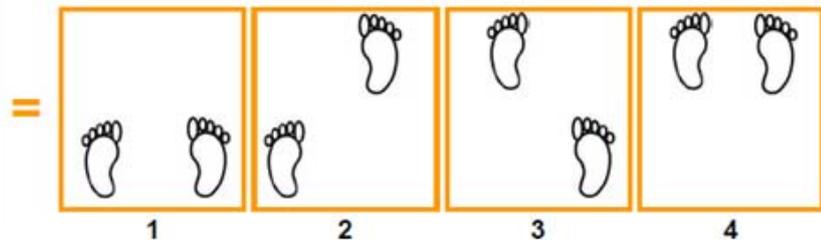


Mando ajustable y muy cómodo.

El mando se ajusta en la posición que más le acomoda al usuario a través de una manilla ubicada en el mástil. Las asas de conducción son muy cómodas para la maniobrabilidad del usuario.



Especificaciones Técnicas.

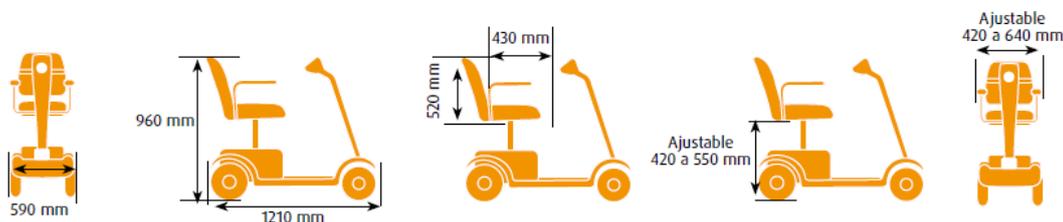

Versión	4 ruedas	Peso de la parte mínima más pesada (tren delantero)	22,5 kg
Anchura total	590 mm	Peso del asiento	12,5 kg
Longitud total	1210 mm	Peso de la unidad tractora	19,5 kg
Altura total	960 mm	Peso de las baterías (unidad)	12 kg
Altura de asiento	Ajustable 420 a 550 mm	Radio de giro	1400 mm
Velocidad	6,5 km/h	Pendiente máxima de seguridad	
Baterías	35 Amp		14° (peso usuario 113 kg) ó 10° (peso usuario 150kg)
Cargador (incorporado)	5 Amp	Distancia del suelo a la base	95 mm
Autonomía máxima*	30 km	Cubiertas	Neumáticas
Color	Rojo	Ruedas delanteras	225 mm (9")
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	150 kg	Ruedas traseras	265 mm (10.5")
Peso total	79 kg	Luces	Si

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile