

Coche Infantil Modelo Jazz.

Coche de paseo postural con amortiguación, para niños. Ajustable a las necesidades particulares de cada usuario, y adaptable a su crecimiento. Con un innovador sistema de deslizamiento del asiento y el respaldo, además de disponer de asiento basculante y respaldo reclinable. Estructura de aluminio, plegable.



Características

Reclinación del respaldo.

El coche permite reclinarse el respaldo en 180° obteniendo una posición totalmente horizontal.



Sistema de Estabilidad BSS.

El sistema BSS que posee el coche Jazz permite desplazar automáticamente (al momento de reclinarse el respaldo) los soportes del asiento del coche, con el propósito de mantener en su misma posición el centro de gravedad, asegurando de esta manera la estabilidad total del coche.




Sistema de Amortiguación.

El coche dispone de un sistema de amortiguación para que el niño no sufra a causa de las diferencias de terreno. Además posee un bloqueador para inhabilitarlo si se desea.




Botón de Bloqueo

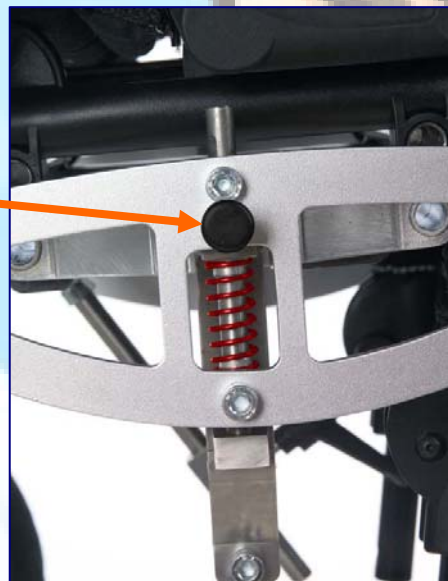

Tapicería transpirable.

La tapicería microperforada es totalmente transpirable. De secado rápido, y de tacto muy agradable para el niño.

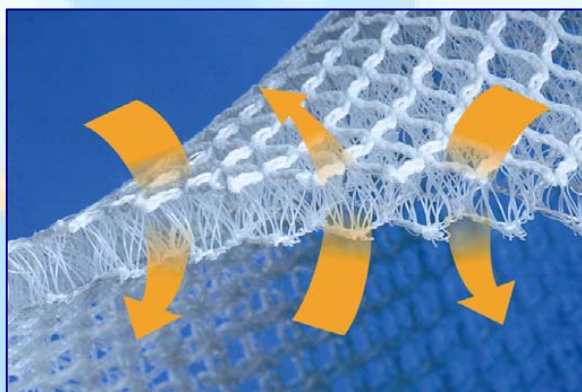

Asiento desmontable.

Moviendo la palanca situada debajo del asiento, éste se desmonta muy fácilmente de la estructura, para cambiar su posición mirando al frente o atrás o para transporte.



Basculación del asiento.

Tiene un alto rango de basculación, desde -10° hasta $+40^{\circ}$. La basculación Negativa favorece una postura más activa del niño.



Regulación de Altura, Profundidad y anchura.

Tanto el respaldo como el asiento y los pies permiten graduarlos de manera sencilla en la medida que el niño vaya creciendo.



Reposapiés elevables y ajustables en altura



Sistema de seguridad.

Posee freno de pisador en las ruedas traseras, y en las ruedas delanteras, bloqueador de giro de las horquillas.



Plegable


El coche permite regular la altura de las asas de empuje conforme a la altura de la persona que traslada al niño.



También su estructura es plegable, una vez desmontado el asiento, para cargarlo en un vehículo.

Variedad de colores

Tenemos disponible de una gama de colores en los laterales para su elección.

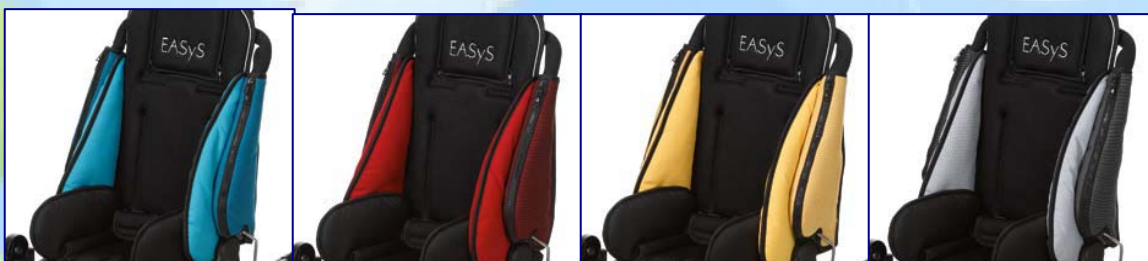

Accesorios Opcionales



Barra protectora



Cinturón en H



Peto mariposa



Soportes de tronco



Soportes con cinturón



Soportes de cabeza



Cuña abductora



Bandeja transparente



Capa completa



Cinchas para los pies



Sombrilla



Chaleco seguridad



Saco de invierno

Cuadro de Especificaciones técnicas



ESPECIFICACIONES

	JAZZ1	JAZZ 2
• Basculación asiento	-10 - +45°	-10 - +40°
• Anchura asiento ajust.	19-31 cm.	25-36 cm
• Profundidad asiento ajust.	19-30 cm	27-38 cm
• Altura de asiento	48 cm	54 cm
• Altura respaldo ajust	40-65 cm	53-73 cm
• Dimensiones totales	60 x 104 x 100 cm	68 x 111 x 111 cm
• Dimensiones plegada	60 x 50 x 88 cm	68 x 52 x 99 cm
• Altura de asa de empuje	92 – 114 cm	92 – 120 cm
• Ruedas	7,5" / 10"	7,5" / 10"
• Peso máximo	35 kg	40 kg
• Peso total	15.9 kg	18,6 kg

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile