

Orto - Medic

www.ortomedic.cl

## Silla de Baño y ducha

Modelo SB-6W

**Nueva**



### Características del producto.


Esta silla fabricada en Aluminio y plástico ideal para ducha. Sus apoyabrazos se abaten para trasladarse a la silla desde cualquiera de sus lados, además de sus apoyapiés graduables en altura, abatibles hacia los costados y desmontables. Posee ruedas traseras en aro 24" **desmontables** con freno, para desplazarse de forma independiente.

Puede ser utilizada para el traslado dentro de casa, también como un baño portátil en el cuarto, o una silla para ducharse.

## Beneficios del producto.


### Brazos abatibles.

Los brazos se abaten hacia arriba o se pueden desmontar con el fin de liberar el acceso lateral, para una transferencia más cómoda. Cuenta además con un sistema de bloqueo para un apoyo seguro.

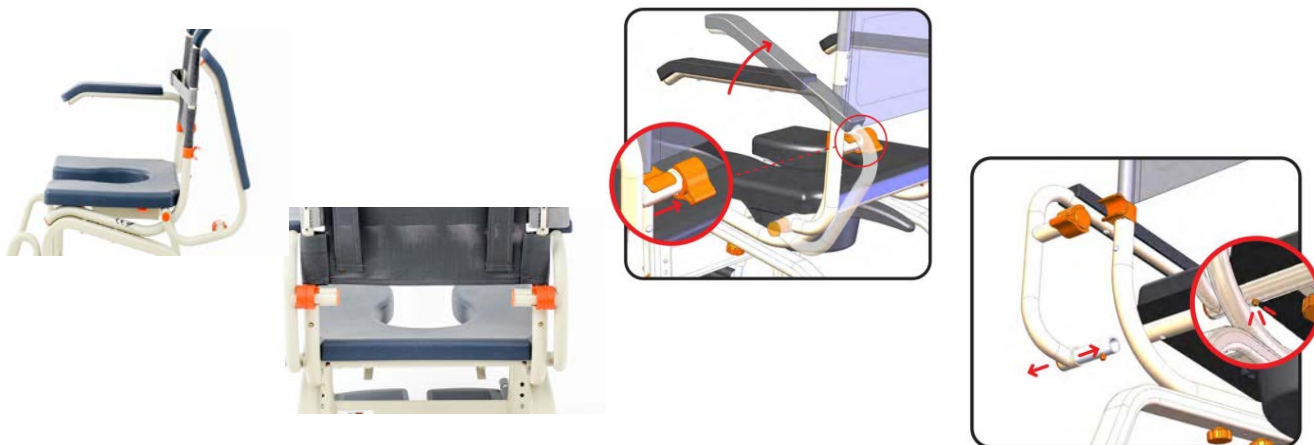

### Apoyapiés abatibles y desmontables.

Los apoyapiés se abaten hacia los lados para acercarse a un lugar en espacio reducido. También se desmontan para transporte y finalmente la plataforma de pies es graduable en altura.

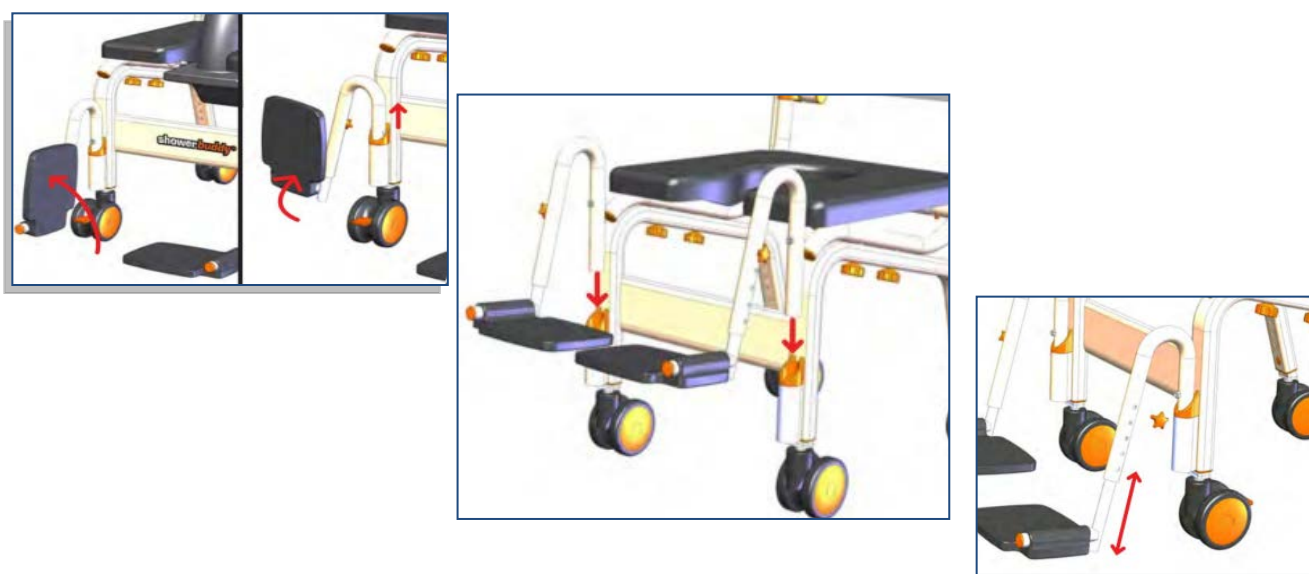

### **Ruedas traseras en un aro de 24" con freno.**

A todas las ventajas que posee esta se suma la independencia que proporcionan sus ruedas traseras en aro 24", permitiendo la autopropulsión por parte del usuario (como lo son las sillas de ruedas tradicionales).

Como un adicional a las ventajas de la autopropulsión, sus ruedas traseras poseen un eje de desmonte rápido para poder sacarlas sin necesidad de herramientas.



### **Balde con tapa.**

A demás esta silla dispone de un balde tipo chata permitiendo utilizar la silla como un inodoro portátil que puede ser usado en la comodidad de una habitación sin necesidad de ir al baño.



## **Cinturón de seguridad y respaldo de malla.**

Para dar seguridad en el traslado posee un cinturón de tórax fijado al marco del respaldo y con broche plástico para una segura y fácil fijación. Además destacamos la malla del respaldo aireada para la evitar acumulación de líquidos, siendo de mayor adherencia para evitar deslizamiento.



## **Altura de asiento graduable.**

En la búsqueda de una buena posición y estabilidad al sentarse, el asiento ofrece la posibilidad ajustar su altura e inclusive dar una pequeña pendiente hacia atrás evitando de esta manera el deslizamiento hacia delante del paciente a través del asiento.



## **Especificaciones Técnicas**

Peso de producto:	22 Kg
Altura:	50 cm
Ancho:	64 cm
Profundidad:	63 cm
Soporte máximo de peso:	120 Kg

**[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)**  
**Julio Prado # 1665**  
**Fono: 22698090 – 22698089**  
**Stgo. - Chile**