



Silla infantil

Action Junior



Action Junior es una silla ligera, con chasis de aluminio plegable, especialmente diseñada para cumplir las necesidades de los niños. Tiene un diseño moderno y atractivo según el gusto de sus pequeños usuarios.

Características

Fácil de transportar.



La silla es totalmente práctica a la hora del transporte.

Con ruedas traseras de desmonte rápido, basta sólo apretar el botón en el centro de la rueda (en el eje) y se puede desprender la rueda completa de la silla para reducir su espacio para colocarla en el porta equipaje del vehículo.



Además posee respaldo plegable (sólo para transporte) con el fin de reducir aún más el tamaño para los espacios más reducidos (vehículos city-car)



Sumando a su reducción de espacios presenta apoyapiés abatibles (hacia dentro y hacia fuera) y desmontables.




Totalmente Configurable

Para mejorar los resultados de conducción y postura sedente, el soporte de la rueda trasera (A) ofrece 20 posiciones distintas.


Además dispone de apoyabrazos graduables en altura y profundidad (B) con la finalidad de conseguir un adecuado soporte de brazos.

Conjuntamente a lo ya mencionado posee Tela de asiento graduable en profundidad (C), para obtener el apoyo adecuado de asiento sin producir daño en la fosa poplítea (por roce y/o presión) o escara por falta de apoyo y presión excesiva.

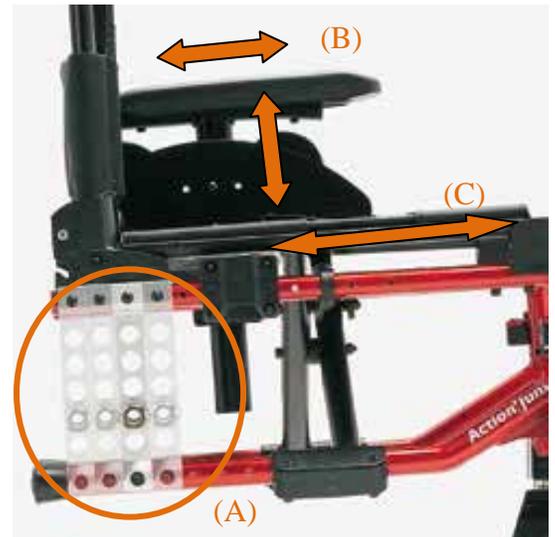

Por otra parte el respaldo es regulable en tensión para evitar el efecto hamaca que se produce en el tapizado estándar que propensa la formación de cifosis u otras deformidades.

Los apoyapiés son graduables en altura (A), su plataforma permite una graduación tanto de profundidad (B) como de angulación (C), para cuando hay complicaciones de flexión o extensión tibio-tarsal (ejemplo, pie equino).

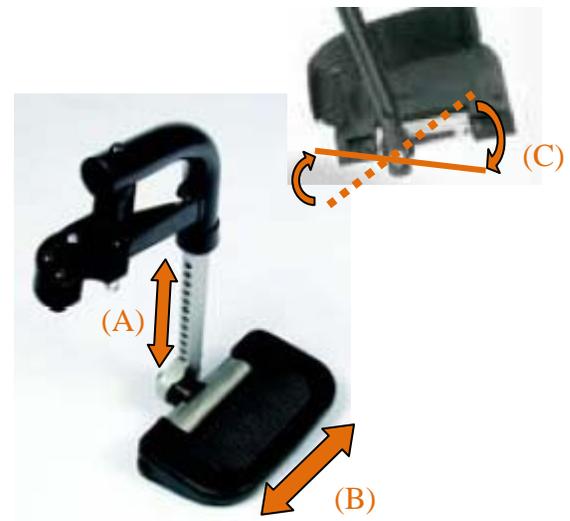

Agregando a toda esta gama de configuración no podemos dejar de mencionar que para aquellos casos cuando la rigidez pélvica lleva las piernas en extensión (apertura de piernas) quedando los pies fuera del espacio y plataforma de apoyo, la silla de ruedas permite que los reposapiés se puedan configurar en apertura, así el espacio para las piernas se ensancha y las plataformas se separan para coincidir con la caída de los pies.



Accesorios Adicionales (Se venden por separado)

Mesa de policarbonato, transparente, abatible.



Cubre Rayos con diseño entretenido.



Cuadro de Especificaciones técnicas

					
305 / 330 /	250 a 300 / 300 / 300 a 350	410 / 435 / 460 mm	370 / 400 / 430 / 350 a 430 mm	150 a 250 / 180 a 280 mm	125 a 450 mm
					
1,5° / 5° / 8,5°	7° / 0° a 30°	Ancho de asiento +200 mm	870-1130 mm	900-1000 mm	325 mm
					
15 kg	80 kg	8.5 kg			

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 22698090 - 22698089
Stgo. - Chile