

Grúa de traslado

Modelo Sunlift G150-E

Sunrise Medical.



Características del producto.

La grúa Sunlift G150-E es una grúa eléctrica de acero, resistente y maniobrable gracias a sus cuatro ruedas y sus asas de traslado que son muy cómodas y amplias. Además es desmontable, para poder transportarla en algún vehículo.

¡ Resistente y maniobrable !

Beneficio del Producto


Gran rango de elevación

Su importante rango de elevación, permite su uso para cualquier tipo de situaciones. Permite recoger al paciente del suelo, de una silla o sillón, y de cualquier cama domiciliaria u hospitalaria.



Dimensiones compactas

Sus dimensiones al ser compactas favorecen su maniobrabilidad.

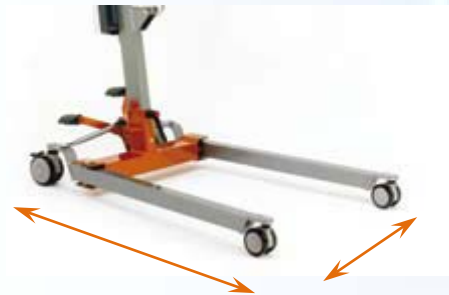

Asas Ergonómicas

Sus asas de empuje son muy amplias y cuentan con una superficie antideslizante, brindando comodidad y seguridad para conducir la grúa.




Regulación de la apertura de las patas de la grúa

La apertura de las patas de la grúa permite el poder sentar al paciente trasladado sobre un berger o un asiento amplio. Lo fantástico de esto es que se puede realizar fácilmente mediante unos pedales, sin perder estabilidad teniendo al paciente suspendido en la grúa.



Desmontable

Se puede desmontar en dos partes, para transportarla en vehículo, simplemente aflojando una manilla y un perno que se encuentra bajo esta, en la base que sostiene el mástil.

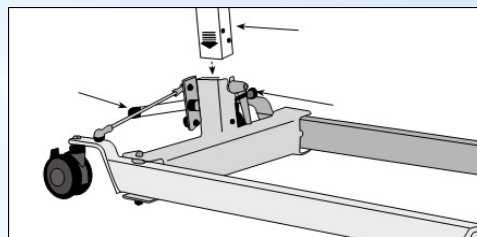

Mando Eléctrico sencillo

El joystick posee solamente dos botones, uno para elevar y otro para descender. Por otra parte el comando central, que se encuentra instalado en el mástil tiene un botón de paro de seguridad que bloquea los botones del joystick (para que durante el traslado, no se eleve o descienda inesperadamente al pasar a llevar los botones del joystick).



Especificaciones Técnicas.

Peso máximo:	155 Kgs
Altura mínima de la percha:	45 cm
Altura Máxima de la percha:	168 cm
Anchura interna máx. Patas:	112 cm
Anchura externa mín. Patas:	62 cm
Peso total grúa:	22 kg
Peso de la parte más pesada:	15Kg

WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 2698090 – 2698089
Stgo. - Chile