

Cojín JAY 3

Sunrise Medical.



**El sistema de sedestación más completo
ahora con opción de fluido o aire**

Características:

El cojín Jay 3 ofrece una redistribución de la presión superior, óptima estabilidad postural, excelente disipación del calor y la humedad y todo ello con gran comodidad para el usuario.

Fuerza hidrostática



Redistribución Igualitaria de la fuerza para reducir los picos de presión

Pre-contorno



Proporciona reducción de la presión, posicionamiento y estabilidad

Capacidad de posicionamiento




Posicionamiento adecuado para las necesidades posturales

Reducción de tensión



Materiales reductores de tensión. Mantienen una reducción de presión superior

Material microclimático

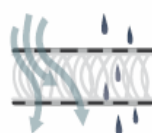

Permite el paso del aire, calor y sudor del usuario

Segmentación



Mayor adaptación para minimizar la inestabilidad y mejor reparto de la tensión

Estabilidad



Estabilidad para óptima función

Forma anatómica de la concavidad pélvica (Optiwell)


La concavidad pélvica (PLA) está dimensionada para acomodar las medidas antropométricas de la pelvis independientemente del tamaño de la silla y cojín. Esto asegura los objetivos clínicos de distribución óptima de la presión y estabilidad lateral. Se consigue una inmersión óptima de los isquios en el fluido y la presión se distribuye hacia el fémur en el PLA y la base del cojín. Disponible en 3 tamaños (A-B-C).



La talla de la hondonada pélvica viene determinada por la distancia entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores y tomaremos como referencia la tabla de abajo:

Nota: La anchura entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores se corresponde con la línea intertrocanterea y esto asegura la correcta talla de la hondonada pélvica para la óptima inmersión de los isquios y la redistribución de la presión hacia trocánteres y fémur.

EIAS (Espinillas Antero-Superiores)

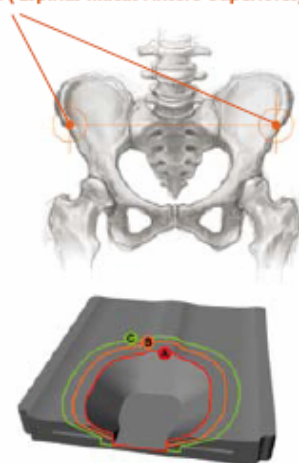

Relación entre tamaño de PLA con anchura de EIAS en el cojín JAY J3

Anchura cojín	Talla de PLA	Anchura EIASs
Todas	A	< 25 cm
40 - 60 cm	B	25 - 30 cm
50 - 60 cm	C	> 30 cm

Cojines de ancho 30 o 35cm no disponibles en perfil profundo.

Bolsa de Fluido Standard o Personalizable

El usuario puede seleccionar entre bolsa de Fluido Standard o Personalizable. La bolsa de fluido estándar está diseñada para usuarios con posturas simétricas y condiciones estables. La Bolsa de Fluido Personalizable permite optimizar el nivel de fluido en acomodaciones/correcciones de oblicuidades pélvicas y da cabida a necesidades cambiantes.

Bolsa de fluido Standard



Bolsa de fluido personalizable



Opción de Tecnología de Aire

Contamos ahora con una nueva opción, la Tecnología Roho Dry Flotation™, que en combinación con la base JAY 3, te permite darle el cuidado y la protección a tu piel como deseas, sin sacrificar la estabilidad ni el posicionamiento.



Se disponen en dos modelos:

1 válvula: Ajuste inmediato para optimizar el nivel de aire en el usuario estable y simétrico.



2 válvulas: Ajuste independiente del nivel de aire en cada cámara (indicado especialmente para acomodar/corregir oblicuidades pélvicas y/o cambios en la evolución del usuario.).



Tecnología ROHO® DRY FLOATATION®: Opción ideal cuando la ligereza del cojín es prioridad.

Nueva tecnología en la funda

Jay 3 incorpora funda microclimática de serie. El tejido tridimensional 3DX consigue una disipación óptima del calor y la humedad, proporcionando al usuario una alta protección antiescaras, y la capa de espuma reticulada facilita el flujo del aire optimizando la respiración de la piel. Opción de funda resistente a la incontinencia.




Máxima adaptación al usuario

Para un buen posicionamiento del usuario es fundamental que el producto se adapte a sus necesidades clínicas. Por ello, el cojín Jay 3 permite variar los niveles de fluido y ofrece una amplia gama de opciones para modificar la base del cojín.

Corte 20° para acomodación isquiotibiales



Cortes para acople a tubos de respaldo

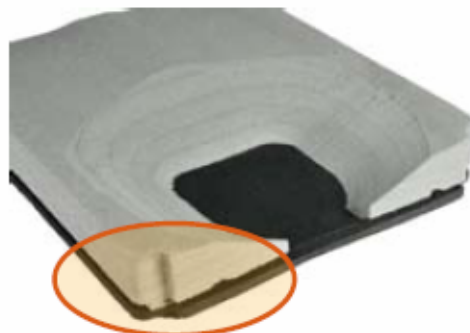

Profundidad y Tallas


Profundidad

El Jay 3 está disponible tanto en perfil Standard como en Profundo. La versión profunda ofrece una inmersión óptima para el usuario con riesgo muy alto de escaras, que puede tener atrofia muscular severa y/o compromiso de integridad de la piel. La versión estándar ofrece redistribución de presión y estabilidad para usuarios con riesgo alto de escaras, pero sin tanto compromiso de masa muscular e integridad de la piel.

Standard. Usuario con riesgo alto de escaras



Profundo: Riesgo extremo de escaras- requiere la maxima inmersión debido a una importante atrofia muscular.

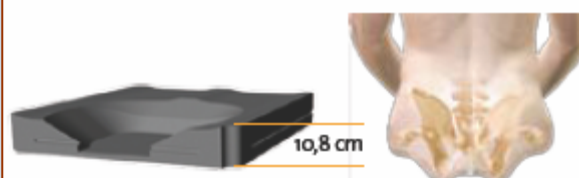

Tallas

Anchura del cojín												
Profundidad del cojín	cm	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
	30											
	35											
	38											
	40											
	42											
	44											
	46											
	48											
	50											
	56											
	60											

El cojín Jay 3 está disponible en una amplia gama de tallas desde 30x30 hasta 60x60cm. El cojín debe pedirse para adaptarse a las medidas de la silla de ruedas.


En todas las tallas se ha incrementado la capacidad de soporte de peso para satisfacer las necesidades del usuario bariátrico.

Peso máx de usuario cojín 30-48cm= 150 kg

Peso máx usuario cojín 50 cm-60 cm = 227 kg

Accesorios de Posicionamiento

El cojín Jay3 ofrece una excelente capacidad de posicionamiento gracias a su base (no porosa de células cerradas) y a la opción de poder añadir una amplia gama de cuñas de posicionamiento para crear contornos de mayor soporte.

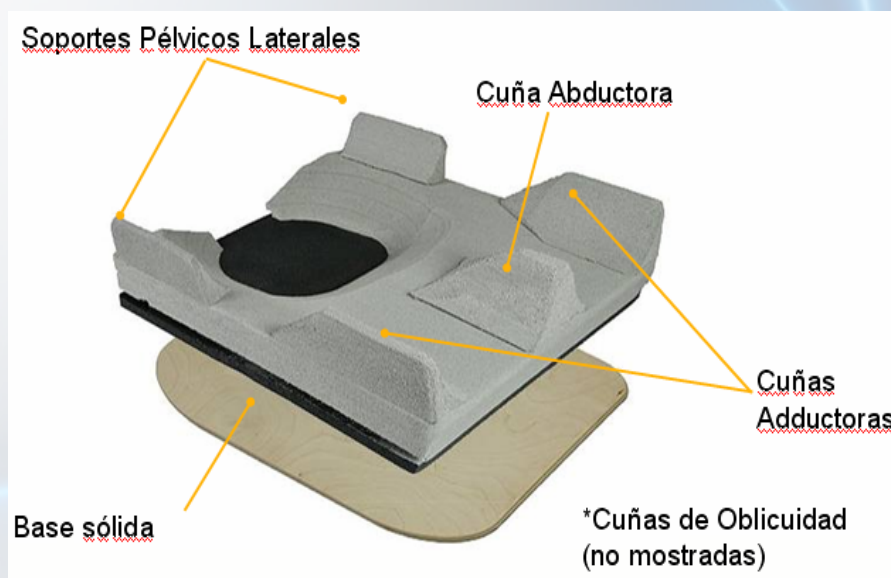

Combina el cojín Jay 3 con el respaldo Jay 3 para un sistema de posicionamiento completo.

Los beneficios del cojín Jay 3 sólo pueden ser optimizados y maximizados en combinación con un soporte posterior adecuado a la espalda de cada usuario. Esto es fundamental para optimizar el alineamiento vertebral, la estabilidad, el confort y el potencial de función de cada usuario; así es posible dar solución a una amplia gama de necesidades clínicas.

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile

