

**NEW**

**Image**

**Orto - Medic**  
[www.ortomedic.cl](http://www.ortomedic.cl)



## **Características del producto.**

Silla de ruedas con 2 motores de gran rendimiento, 6 ruedas macizas que se adaptan a las diferencias del terreno, asiento tipo butaca reclinable y brazos abatibles.

## Beneficio del Producto


### Asiento

El asiento es de tipo butaca y desmontable.

Al ser tipo butaca, permite reclinar el respaldo y su forma anatómica da comodidad al usuario, además posee un cabezal acolchado para apoyar la cabeza al momento de reclinar el respaldo.

El respaldo es abatible hacia delante y lleva en la parte trasera un bolsillo para el guardado de objetos.

Posee también un cinturón de seguridad.

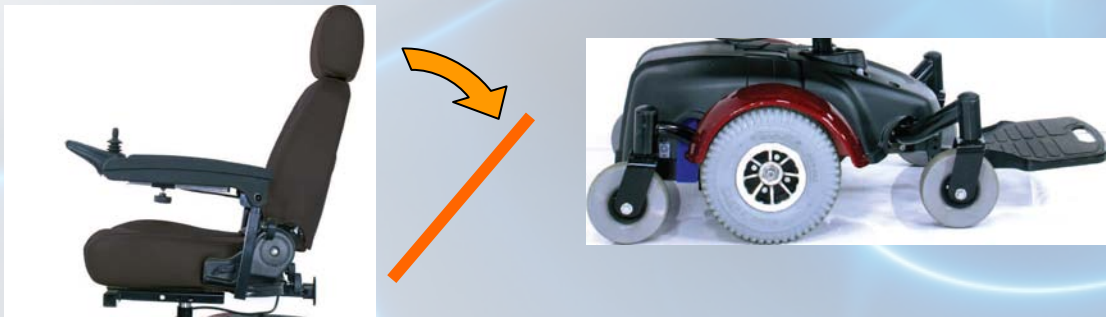

Además el asiento es giratorio (en tres posiciones: izquierda, frente y derecha) ofreciendo de esta forma fácil acceso para sentarse o salir de la silla por los costados.



## Reposabrazos

Los reposabrazos son abatibles, graduables en anchura para que cada usuario busque su comodidad. Las almohadillas de los apoyabrazos es de forma ergonómica lo que la hace muy cómodo para adaptar el brazo del usuario al mando.




## Ruedas

Consta de un total de 6 ruedas, las cuales se adaptan a la superficie del terreno para dar mayor estabilidad y seguridad al desplazarse.



(Desnivel)

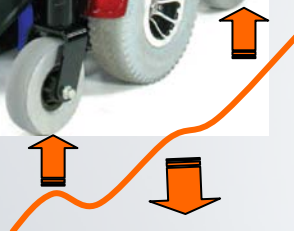

La tracción y dirección la lleva en sus ruedas centrales. Es una nueva dinámica de suspensión, permitiendo reducir los espacios necesarios para girar.



Las baterías tienen un fácil acceso (en caso de que necesite revisarlas)



## Especificaciones Técnicas.

<b>Peso total del producto:</b>	90 kilogramos (Incluye baterías)
<b>Dimensiones:</b>	105 cm (L) x 60 cm (A) x 110 cm(H)
<b>Límite de peso de usuario:</b>	130 kilogramos el límite de peso del usuario.
<b>Tipo de Baterías:</b>	2 baterías de 35 Ahr AGM
<b>Pendiente max. De inclinación:</b>	4°
<b>Tamaño de las ruedas:</b>	10 "de tracción sólidos 6 "sólido - frente 6 "sólido - posterior
<b>Rango de autonomía:</b>	17 Kilómetros

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile