

Inmovilizador lateral de cabeza



Características.

Este producto permite fijar la cabeza al momento de transportar a la persona en camilla o tabla de rescate cuando existe daño o riesgo en la zona cervical. Su composición material permite sacar radiografías sin tener que quitar el inmovilizador.


Disponible en color naranja.

Especificaciones Técnicas.

Fabricado en espuma de alta densidad, que no pierde su forma (resiliente al uso), con cobertura de poliuretano lavable, no absorbe fluidos, con orificio a la altura de los oídos lo que permite un fácil monitoreo. Dispone de una base con velcro y correas para ser fijado a la tabla espinal y ajustar los dos cojines laterales, con dos resistentes correas ajustables.

Dimensiones

Largo	40 cm
Ancho	25 cm
Alto	16 cm
Peso	900 gramos aprox.

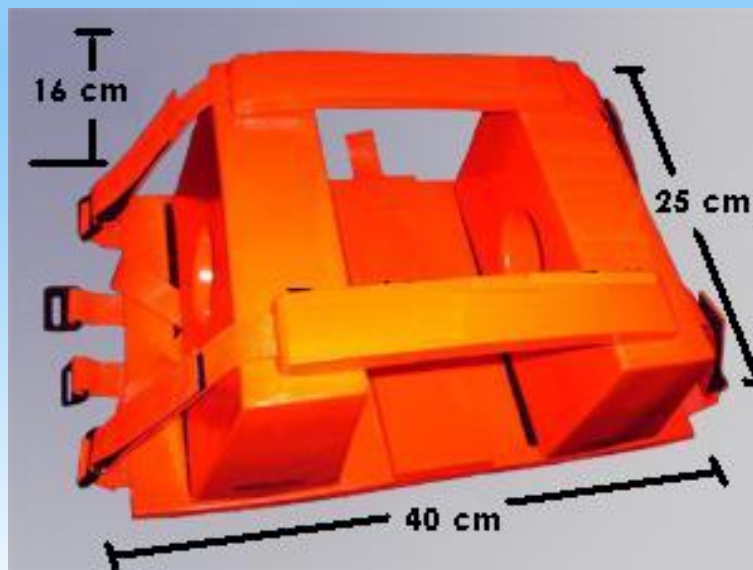

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile