

**ORTOMEDIC**

WWW.ORTOMEDIC.CL

# Silla de Amputado

## Sunrise Medical 105



### **Características del producto.**

Silla de ruedas de acero, con sistema para amputado que desplaza el centro de gravedad hacia atrás; plegable de gran solidez y una apariencia muy atractiva. Reposabrazos abatibles y además desmontables. Rueda trasera grande (de aro 24"), modelo sport. Tapiz impermeable, de fácil limpieza.

Disponibles además en colores azul y verde metalizado o cromado.


## Beneficio del Producto

### Reposabrazos abatibles.

Los reposabrazos son desmontables y además son también abatibles hacia atrás, para facilitar la transferencia del usuario sin necesidad de desmontarlos.



- Los desenclavadores de los reposapiés y los reposabrazos son ergonómicos, muy amplios y de fácil acceso para el usuario.

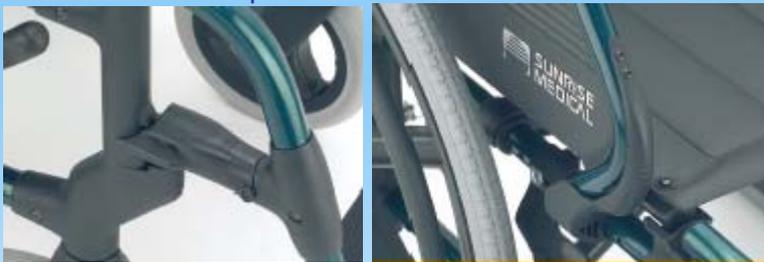

### Sistema de amputado.

El sistema de amputado desplaza el centro de gravedad hacia atrás, dando mayor seguridad acorde a la necesidad del usuario.



- Colores metalizados: Está disponible además de en color cromado y en elegantes y discretos colores como son azul metalizado y verde metalizado.



## Dimensiones.

| Asiento               |                  | Respaldo                |                   | Apoya-brazos         |                       |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                       |                  |                         |                   |                      |                       |
| Ancho del asiento     | Alto del asiento | Profundidad del asiento | Alto del Respaldo | Alto de Apoya-brazos | Ancho del Respaldo    |
| 37-40-43-46-49-52 cms | 51 cms           | 41 cms                  | 45 cms            | 22 cms               | 37-40-43-46-49-52 cms |

| Indicaciones generales          |                                |                               |                                 |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|                                 |                                |                               |                                 |                        |
| Ancho Total de la Silla abierta | Alto Total de la Silla abierta | Profundidad Total de la Silla | Ancho Total de la Silla plegada | Peso Total de la Silla |
| 55-58-61-64-67-70 cms           | 94 cms                         | 105 cms                       | 30 cms                          | 17.4 Kg.               |

(\*): Tanto el ancho del respaldo como el ancho total de la silla van a depender del ancho del asiento, ejemplo:

Ancho asiento: 37 cm.; Ancho respaldo: 37 cm.; Ancho Total: 55 cm.

Soporta hasta 127 kg, cómo peso máximo de usuario.

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Sgto. - Chile