

**ORTOMEDIC**  
WWW.ORTOMEDIC.CL

# Silla de Ruedas Eléctrica F-35 Neurológica

**Sunrise Medical**



## **Características del producto.**

Silla de ruedas eléctrica neurológica (con respaldo reclinable). Plegable y fácilmente transportable. Con baterías de 40 amh, y cargador que permite recargar las baterías en 5 horas.

**¡ Desplázate con total autonomía !**

## **Beneficio del Producto**

### **Plegable.**

La silla presenta un plegado muy compacto, ya que el respaldo se desmonta fácilmente de la silla, y las baterías van en dos cajas para facilitar su manipulación.




### **Respaldo Reclinable.**

El respaldo consta de un sistema que permite reclinarlo hasta dejar al usuario completamente extendido sobre la silla.



### **Reposabrazos ajustables en anchura, y en altura**

Ajuste en anchura en 3cm por cada lado. Con lo que podemos conseguir un ancho de asiento de 48 cm.

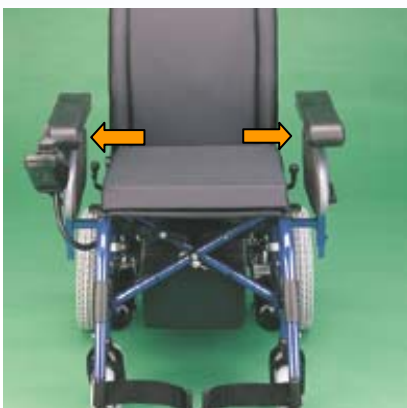

### Reposapiés giratorios hacia el centro.

Los reposapiés son desmontables, y además son giratorios tanto hacia fuera como hacia dentro. De esta forma, pueden abatirse sin necesidad de desmontarlos, para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos como por ejemplo en ascensores.



### Reposapiés elevables (Opcional)

Ud puede solicitar la silla con reposapiés elevables, permitiendo graduar el ángulo de flexión de los pies hasta dejarlos completamente extendidos hacia el frente.




### Mando de control retraible

Con un sencillo movimiento, el mando de control se abate para facilitar el acceso por ejemplo a mesas. Una vez abatido, el mando queda en paralelo al reposabrazos, manteniendo la posición habitual de conducción. De esta forma, resulta muy sencillo el control de la silla para ponerla en marcha de nuevo.



## Dimensiones.

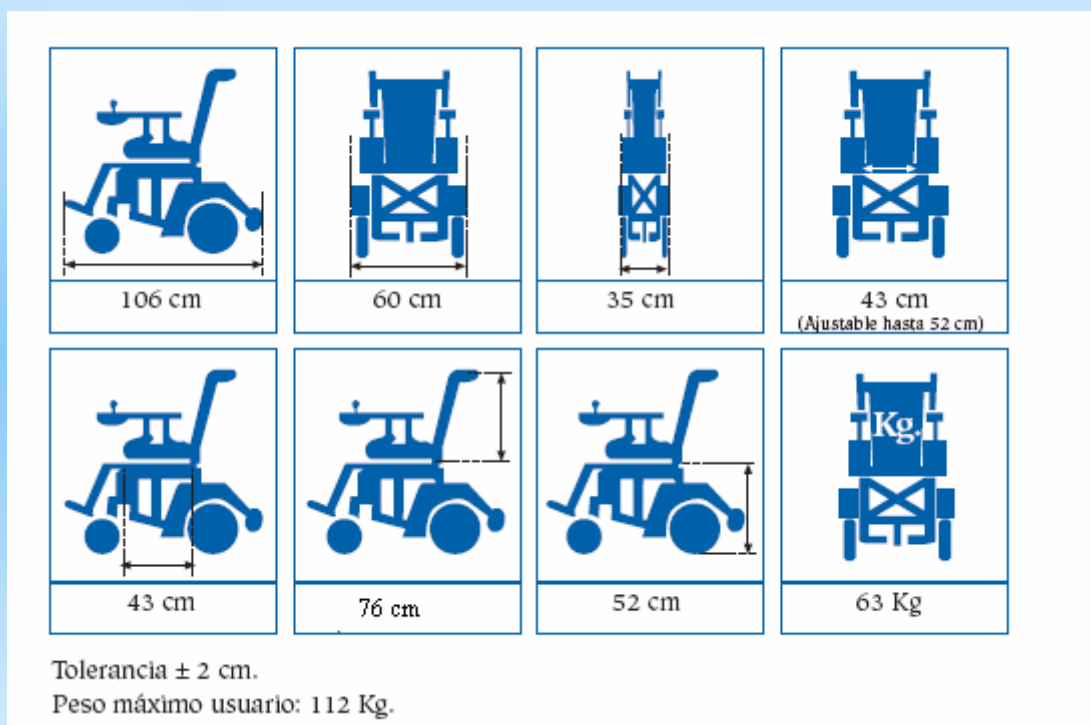

## Especificaciones Técnicas.

Peso del producto	63 kg (inc. batteries)
Anchura del producto	60 cm de rueda a rueda
Longitud/profundidad del producto	106cm
Altura del producto	94cm

<b>Anchura de asiento</b>	43cm se puede incrementar hasta 50cm moviendo los reposabrazos
<b>Profundidad de asiento</b>	43 cm
<b>Altura de asiento</b>	51cm
<b>Altura del respaldo</b>	76 cm (incluido cabezal)
<b>Baterías</b>	40 Amph, de recombinación de gases (sin mantenimiento)
<b>Autonomía aproximada</b>	25 Km (*)
<b>Peso total</b>	63kg (baterías incluidas)
<b>Peso max. de usuario</b>	120kg
<b>Velocidad max.</b>	Max. 6 km/h
<b>Radio de giro</b>	60 cm
<b>Color</b>	Azul

(\*): Las condiciones del terreno, tipo de conducción y el peso del usuario pueden afectar la autonomía de la silla.

**Nota: Consultar por accesorios disponibles para este modelo (Respaldo reclinable, luces, cabezal, entre otros).**

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile