



Características del producto.

Kimobility nos presenta su nueva gama de sillas de Chasis Rígido, superando las expectativas de competitividad en calidad y precio.

Rigidez a toda prueba con un tubo de 1 3/8" de Chasis, ofreciendo la misma ligereza pero entregando mayor robustez, satisfaciendo a los usuarios más exigentes.

Fácil de transportar y sumando aún más a las ventajas que la silla en sí presenta, se agrega su precio haciéndola completamente atractiva.

¡¡Genial!!
una excelente silla a un precio único.

Beneficio del Producto


Diseño Elegante.

Buscando ir a la vanguardia, es que Kimobility trabajó en el diseño de este nuevo producto. Presentando una silla de estructura sólida y elegante, que permite dar un realce visual de usuario, donde la silla (visualmente) pasa a un segundo plano, ligera y muy cómoda.



Amplia gama de accesorios

Dispone de una gran variedad de accesorios para personalizar la silla a su necesidad y deseo, ya sea en los tipos de ruedas tanto delanteras como traseras, tipos de plancha de pies, apoyabrazos entre otros.

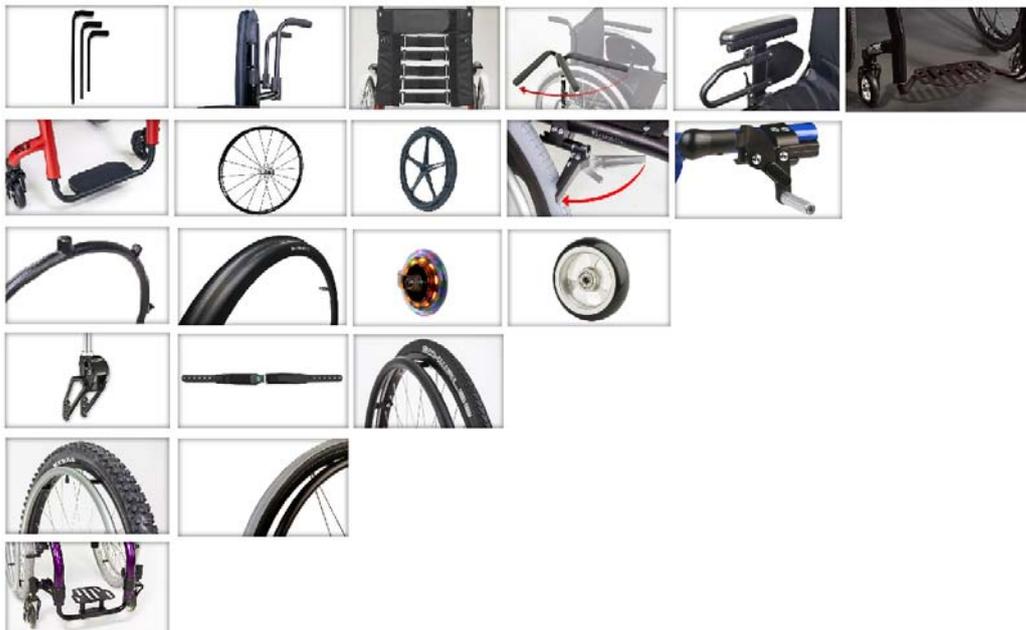

Horquilla ajustable

El ajuste de la inclinación de la horquilla me permite dar mayor rapidez a la silla al acercar las ruedas delanteras a las traseras, ideal quienes buscan sacarle el máximo provecho en rapidez a su silla.



Ajuste del centro de gravedad

Poder ajustar con el centro de gravedad es una característica necesaria para usuarios cuya destreza en el uso demandan mayor ligereza, sin embargo no hay que descuidar que la silla se hace más inestable.

La Rogue ALX permite desplazar las ruedas traseras más adelante para dar ligereza al manejo o más atrás para dar mayor estabilidad. También cambiar el tilt (inclinación de asiento hacia atrás) para quedar mejor posicionado y hacer más fácil elevar las ruedas delanteras para sortear las dificultades en el camino.



Ajuste del camber

El camber posibilita ajustar la inclinación de las ruedas traseras para dar mayor ligereza y estabilidad en los giros, no obstante aumenta el ancho total de la silla de acuerdo al grado de inclinación seleccionado. La Rogue ALX dispone de un rango de grados de inclinación para seleccionar el más acorde a necesidad de estabilidad y espacios de tránsito. La separación de las ruedas en relación a la estructura de la silla se puede ajustar fácilmente a través de tuercas.

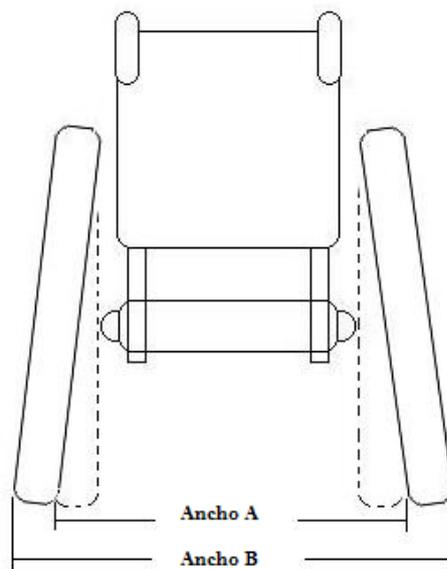


Imagen referencial de la inclinación de las ruedas traseras

Dimensiones.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Peso de la silla: | 8,56 kilogramos. (16 "x 16") |
| Anchura del asiento: | 36 cm. – 56 cm. ancho de asiento |
| Profundidad del asiento: | 36 cm. – 51 cm. de profundidad del asiento |
| Peso máximo de usuario: | 113 kilogramos. |
| Altura delantera del asiento: | 34 cm –60 cm |
| Altura trasera del asiento: | 34 cm – 52 cm |
| camber: | 0°,2°,4°,6° |

Para mayor información de pedido, solicite una evaluación y le orientaremos de principio a fin, para que pueda obtener la silla mas adecuada a sus requerimientos y necesidades.

WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 2698090 – 2698089
Stgo. - Chile