



Cojín Estándar, Postural y de Prevención Básica



**No creerás
su precio**

Un cojín de uso "G"eneral, Cuyo estándar de calidad es premium, rico en características especiales que lo hacen ser todo, *excepto Básico.*

Este cojín ofrece una gama de características que lo posicionan en la categoría Premium. Posee forma anatómica, cuenta con cavidad que reduce la presión de contacto en zona de mayor riesgo de escaras, alta calidad de espuma y materiales de su funda.

Este cojín es recomendado a pacientes que no son de alto riesgo de escaras, que busquen estabilidad de tronco y comodidad al sentarse, a un precio muy accesible.

Características




Reducción de la presión de contacto

La exclusiva forma hexagonal de la espuma en su cavidad, reduce la tensión de superficie e incrementa el envolvimiento alrededor de los isquiones y el coxis. Al utilizar sólo una funda, la presión de contacto se reduce, permitiendo una mejor inmersión dentro de la cavidad.



Forma Anatómica

En cooperación con Georgia Tech para estudiar la antropometría, Axiom G ha diseñado adecuadamente una forma anatómica. La cavidad suavemente contorneada sostiene los trocánteres, posicionando los fémures y envolviendo las tuberosidades isquiales y el coxis para dar apoyo y estabilidad

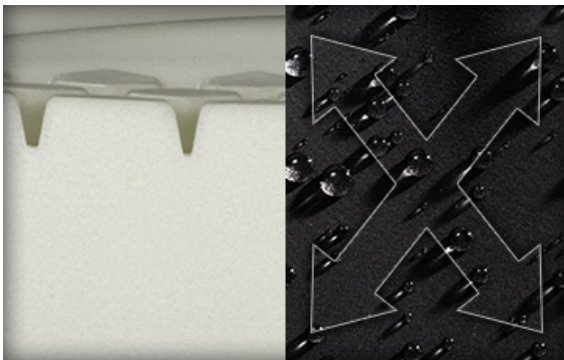

Materiales de Alta Calidad

La base del Axiom G está construida con espuma de poliuretano de alta DFI. Su funda está hecha con una capa superior elasticada en 4 direcciones, resistente a la humedad, con un panel inferior resistente al deslizamiento y paneles laterales de alta duración. Todos los elementos incluidos en estos materiales dan como resultado un producto duradero, confortable y funcional.



Funda Rica en Características

La innovadora funda del Axiom G es estéticamente agradable con beneficios funcionales tanto para el usuario como para su asistente. Su cremallera resistente a la humedad y su tirador con argolla para el dedo, facilitan la colocación y remoción de la funda protegiendo la espuma. Cuenta con una manija frontal de fácil acceso para colgar accesorios.

Especificaciones Técnicas

Ancho	14", 16", 17", 18"
Profundidad	16"
Altura (Canales para Piernas)	2.25"
Altura (Total)	3"
Peso	0.99 kg
Capacidad de Peso	158 kg

WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 222698090 – 222698089
ventas@ortomedic.cl
Stgo. - Chile