



Cojín Postural y de Prevención Media



**Te enamorarás
de la espuma**


Sumérjase.

Un cojín de Protección de la Piel que provee los elementos de diseño del Axiom Difference con énfasis en la inmersión y distribución de la presión, Axiom S es un gran cojín inicial para la protección de la piel.

Su precio razonablemente atractivo.

Recomendado para pacientes que requieran protección media/baja de escaras, mayor posicionamiento y estabilidad de pelvis.

Características

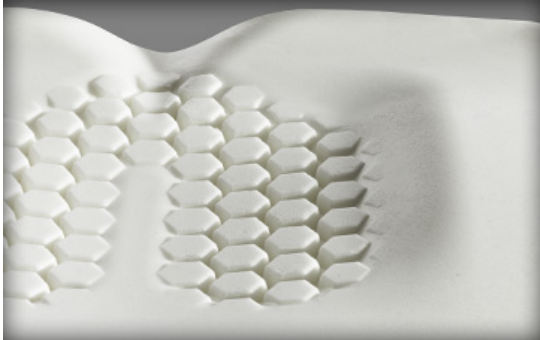


Mayor inmersión y superficie de contacto/menos presión y riesgos de escaras

Sus Formas hexagonales más profundas que las del AXIOM G permiten una mejor distribución de la presión sobre la superficie de contacto y un buen posicionamiento de la pelvis. Todas estas características llevan a un mejor confort.

Forma Anatómica

En cooperación con Georgia Tech para estudiar la antropometría, Axiom S ha diseñado adecuadamente una forma anatómica. La cavidad suavemente contorneada sostiene los trocánteres, posicionando los fémures y envolviendo las tuberosidades isquiales y el coxis para dar apoyo y estabilidad.

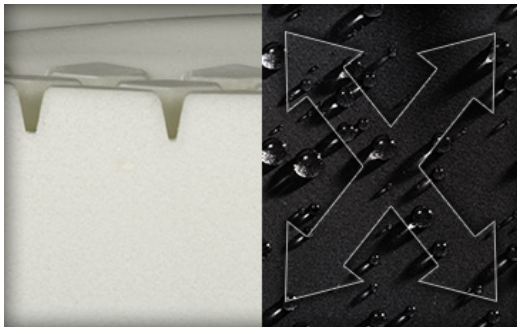

Materiales de Alta Calidad

La base del Axiom S está construida con espuma de poliuretano de alta DFI. Su funda está hecha con una capa superior elasticada en 4 direcciones, resistente a la humedad, con un panel inferior resistente al deslizamiento y paneles laterales de alta duración. Todos los elementos incluidos en estos materiales dan como resultado un producto duradero, confortable y funcional.

Funda Rica en Características

La innovadora funda del Axiom S es estéticamente agradable con beneficios funcionales tanto para el usuario como para su asistente. Su cremallera resistente a la humedad y su tirador con argolla para el dedo, facilitan la colocación y remoción de la funda protegiendo la espuma. Cuenta con una manija frontal de fácil acceso para colgar accesorios. Materiales de excelente calidad.



Especificaciones Técnicas

Ancho (Disponible)	14"-15"-16"-17"-18"
Profundidad (Disponible)	14"-16"-17"
Altura (Canales para Piernas)	2.25"
Altura (Total)	3"
Peso	0.99 kg
Capacidad de Peso	158 kg

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 222698090 – 222698089

ventas@ortomedic.cl

Stgo. - Chile