

Little Gem^{®2}





Little Gem^{®2}

Tan pequeño y manejable
que te lo llevarás
a todas partes





Con apenas 51 cm de anchura y un pequeño radio de giro la Little Gem®² es el scooter ideal para moverte tanto en interiores como en exteriores.

Fácil de desmontar y transportar

El Little Gem®² se desmonta fácilmente para que puedas llevártelo a cualquier parte. Sólo tienes que retirar el asiento, extraer las baterías y tirar de la palanca de desmontaje. El tren trasero se separa del resto de la estructura en unos pocos segundos.

Así puedes guardarlo fácilmente, por ejemplo, en el maletero del **auto**.



Tren trasero desmontable en segundos, con sistema de doble asa para facilitar su manejo



Manillar plegable hacia delante para facilitar el transporte

Confortable y manejable

Con cesta delantera para que puedas llevar objetos, y mandos muy accesibles y sencillos de manejar.



Mando sencillo



Amplio espacio para los pies

Accesible

Porque gracias a sus reposabrazos abatibles, a su asiento giratorio y al manillar ajustable que puede desplazarse hacia delante podrás subir y bajar de la scooter de la manera más fácil y cómoda.





Manillar ajustable mediante palanca



Asiento acolchado giratorio con reposabrazos abatibles

Little Gem^{®2}

Tan pequeño y manejable que te lo llevarás a todas partes

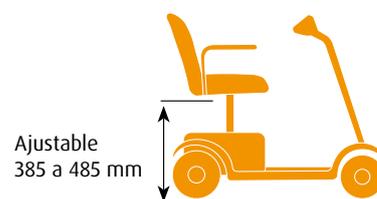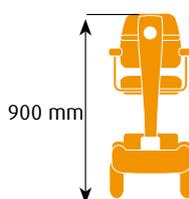

Especificaciones técnicas

Versión	4 ruedas	Peso de las baterías (unidad)	4.31 kg
Anchura total	510 mm	Peso del asiento	10.4 kg
Longitud total	980 mm	Peso del tren trasero	10.8 kg
Altura total	900 mm	Peso de la parte mínima más pesada	16 kg
Altura de asiento	Ajustable 385 - 485 mm	Radio de giro	1150 mm
Velocidad	6.4 km/h	Pendiente máxima de seguridad	9°
Baterías	12 Amp	Distancia del suelo a la base	70 mm
Autonomía máxima*	16 km	Cubiertas	Macizas
Color	Azul	Ruedas delanteras	175 mm (7")
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	113 kg	Ruedas traseras	190 mm (7.5")
Peso total	40 kg	Luces e Indicadores	No

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso



www.ortomedic.cl

22698090-22968089

ventas@ortomedic.cl