

Respaldo JAY 3

Sunrise Medical.



Características:

La gama de respaldos Jay 3 ofrece una amplia variedad de formas y tamaños para ajustarse a las diferentes necesidades del usuario. Seleccionando el contorno, nivel de soporte, anchura y altura de la carcasa, proporciona un soporte óptimo y posicionamiento a la mayoría de los usuarios. Gracias a su sistema de anclajes, resulta muy fácil de retirar y acoplar para el usuario. Además, ofrece múltiples ajustes en anchura, ángulo y profundidad.

¡ De acuerdo a tu necesidad !

Compatible con el 90% de sillas de ruedas que disponemos

El sistema de anclajes Jay 3 presenta un revolucionario diseño de abrazadera compatible con una gran variedad de diámetros de tubo (desde 1,9 cm hasta 2,8 cm). Con sólo dos puntos de anclaje, se puede colocar en múltiples posiciones del tubo del respaldo. Además es ajustable en anchura hasta 5 cm y en ángulo hasta 22° sin reducir la profundidad del asiento.


Ajustar para diferentes diámetros de tubos.



Ajustar para diferentes posiciones del sistema de anclaje.



Ajustable en anchura y en ángulo de inclinación.

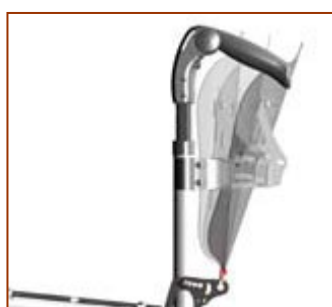


Múltiples cuñas de posicionamiento para alineación vertebral

Un respaldo rígido debe adaptarse totalmente a la forma del usuario con el fin de obtener una distribución óptima de la presión, un soporte correcto y aumentar el confort y la funcionalidad. Por esta razón, el respaldo Jay 3 ofrece una gran variedad de cuñas de posicionamiento que permiten a los profesionales la adaptación total del respaldo al usuario.




Accesorios

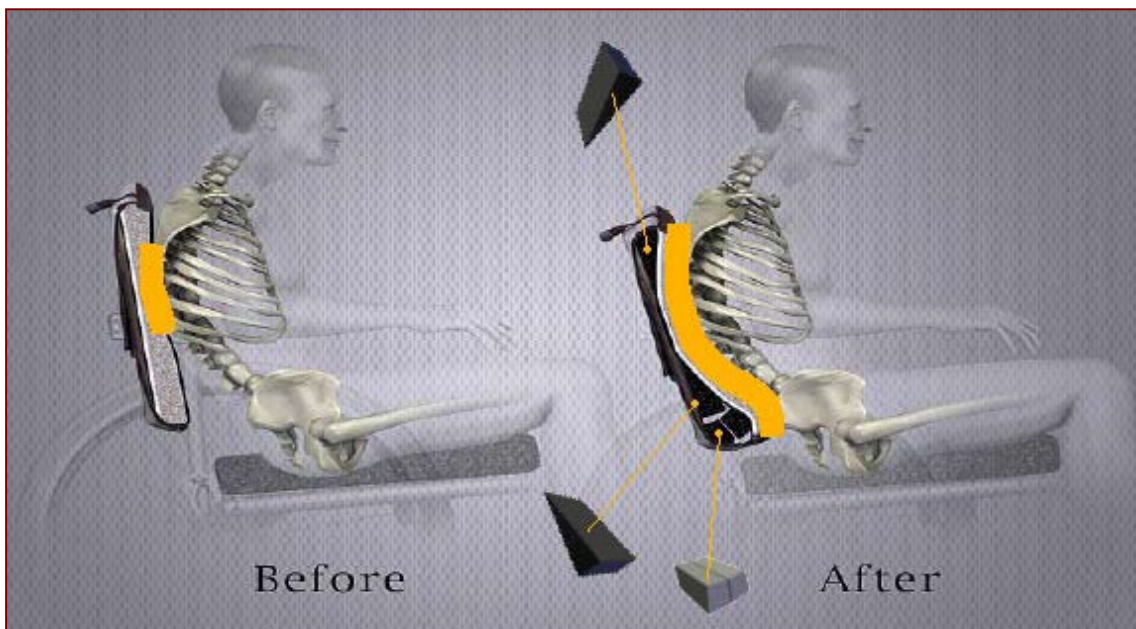

Amplia gama de formas, tamaños y tallas

La gama de respaldos Jay 3 presenta una amplia variedad de formas y tamaños. De esta manera se ofrece un soporte óptimo a la gran mayoría de usuarios. El nuevo respaldo Jay 3 permite seleccionar 2 tipos de profundidad de contorno dependiendo de cuanto soporte lateral necesita el usuario, 4 niveles de soporte según su estabilidad de tronco, 3 alturas de respaldo y una gran variedad de anchuras. ¡Hasta 64 respaldos diferentes!

Alturas

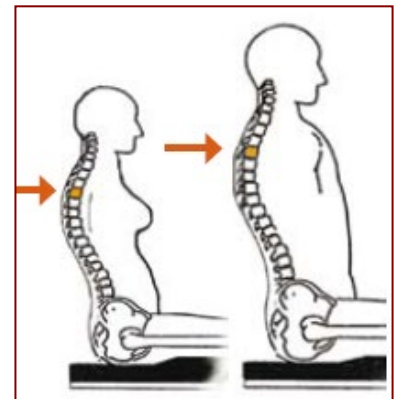

Profundidad

Los usuarios pueden elegir entre 4 niveles distintos de soporte, según sus necesidades funcionales y su estabilidad de tronco.



Fácil de colocar y retirar por el usuario

Colocar el respaldo Jay 3 no podría ser más fácil. Simplemente hay que deslizarlo en los anclajes y el respaldo se fija automáticamente. Y desmontarlo es igual de fácil y rápido. Incluso aquellos usuarios con una mayor discapacidad en las extremidades superiores lo encontrarán muy fácil de desmontar.



¡Contáctese con nosotros y lo asesoraremos para escoger el mejor respaldo, conforme a sus necesidades!

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 – 22698089

Stgo. - Chile