

Silla de Aluminio

Nurse
Durable Medical Equipment

Características del producto.

Silla de ruedas de Aluminio, plegable de gran solidez y una apariencia muy atractiva. Reposabrazos graduables en altura y abatibles. Reposapiés desmontables y graduables en altura. Rueda trasera grande (aro 24") con ejes traseros desmontables y ruedas antivuelco.

Una característica que marca la diferencia dentro de la línea Standard es la posibilidad de ajustar las ruedas traseras en su posición permitiendo agilizar la silla o jugar con la inclinación del asiento.

Beneficios del Productos

Reposabrazos abatibles.

Los reposabrazos son graduables en altura acorde a la estatura del usuario y abatibles hacia atrás, para facilitar la transferencia del usuario.



Reposapiés desmontables, abatibles y graduables en altura

Los reposapiés son desmontables, y además son giratorios tanto hacia fuera como hacia dentro. De esta forma, pueden abatirse sin necesidad de desmontarlos, para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos como por ejemplo en ascensores.


Permite una graduación de acuerdo al largo de la pierna



Ruedas traseras ajustables y ejes desmontables.


Ajuste de posición Horizontal

Permite ajustar la rueda trasera horizontalmente cambiando así el centro de gravedad. Cuando la rueda trasera es desplazada más hacia delante la silla de ruedas se vuelve más ligera para maniobrar pero menos estable; mientras que cuando la rueda se desplaza hacia atrás (como se muestra en la siguiente imagen en color naranja), la silla se vuelve más estable.

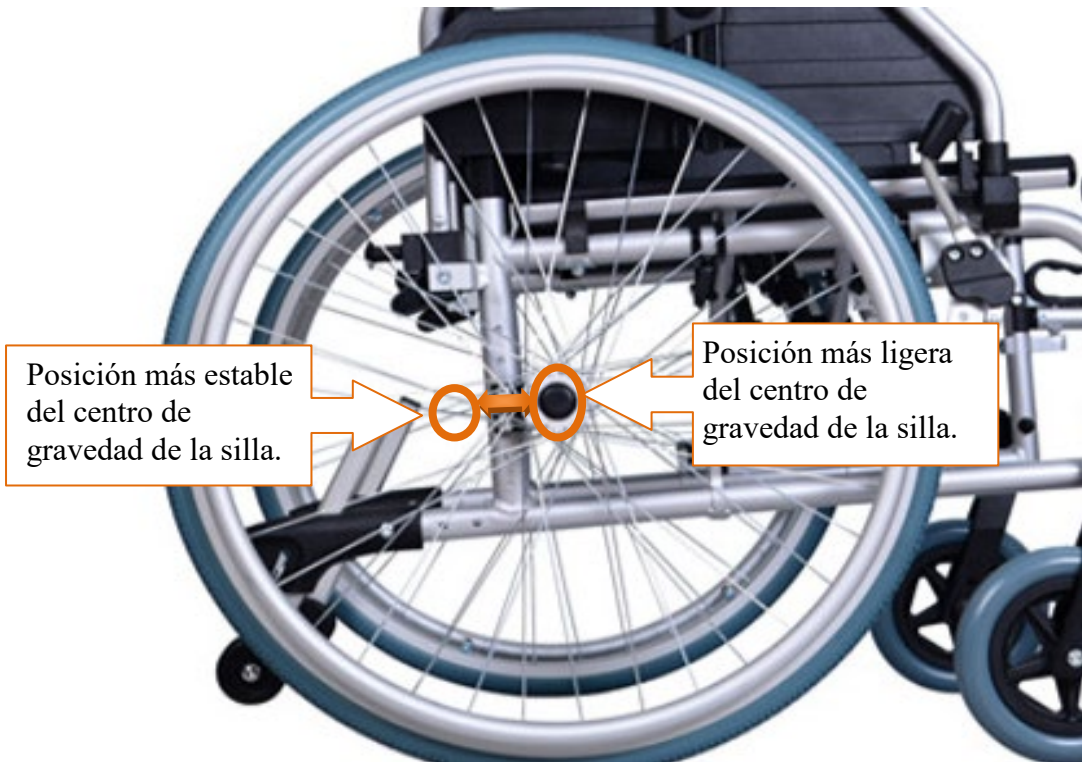

Ajuste de posición Vertical

Por otra parte la silla permite ajustar la rueda trasera verticalmente cambiando así la inclinación del asiento hacia atrás (conocido como TILL) permitiendo concentrar mayor parte del peso en la zona trasera dejando una silla con menos sensación de volcarse frontalmente y a su vez más ligera para levantar ruedas delanteras .

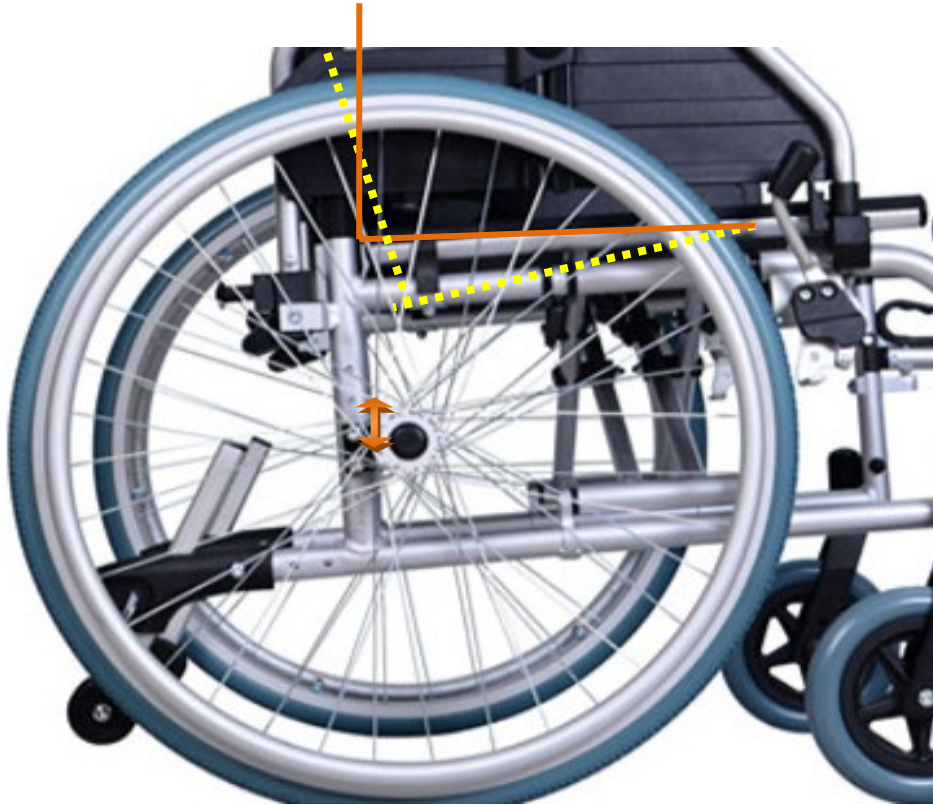

Ejes de desmonte Rápido.

Las ruedas traseras se desmontan fácilmente presionando un botón en el centro de la rueda para reducir su tamaño en el transporte.



Ruedas antivuelco.

La silla cuenta con ruedas antivuelco de serie graduables en altura para otorgar mayor seguridad al usuario.



Especificaciones Técnicas

Ancho de Asiento:	43 cm
Profundidad de Asiento:	41 cm
Ancho total de la Silla:	64 cm
Peso:	15 Kg Aprox.
Ruedas delanteras:	200 x 50 Macizas
Ruedas traseras:	24" Macizas
Color:	Aluminio Oscuro (estilo titanio)



WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 22698090 – 22698089
Stgo. - Chile