



MÁS POTENCIA PARA TU SILLA DE RUEDAS

ALTO
RENDIMIENTO



**EXPLORA TU ENTORNO COMO
NUNCA ANTES**

 **Orto Medic Ltda.** 

56-222698090 / 56-222698089

www.ortomedic.cl

TU FIEL COMPAÑERA TANTO EN EL CAMPO COMO EN LA CIUDAD



56-222698090 / 56-222698089

www.ortomedic.cl

EL MUNDO A TU ALCANCE

Inteligentemente diseñada para que disfrutes de una mayor independencia, la handbike eléctrica Empulse F55 te permitirá llegar a donde antes no llegabas, reservando tu energía y permitiéndote experimentar el verdadero placer de la conducción.

Ultra-compacta y fácil de acoplar, con la F55 podrás dotar a tu silla de ruedas de energía extra siempre que te haga falta. Es la solución ideal cuando no quieres utilizar tu coche, siendo un medio mucho más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, o si solo buscas divertirte.



DISFRUTA DE LA CONDUCCIÓN



**LISTO
PARA
SALIR**



CONTIGO, DONDE QUIERAS IR

La vida en la ciudad es vibrante y dinámica. No te quedes atrás y síguele el ritmo disfrutando sin límites de tu movilidad. Ascensores, calles angostas, pasillos estrechos en los supermercados... Nada de eso será un problema gracias al radio de giro súper reducido de la F55.

Activa el modo de conducción automática y no tendrás que preocuparte de accionar todo el tiempo la palanca. La handbike Empulse F55 mantendrá la velocidad seleccionada para hacértelo más fácil. ¿Quieres llegar un poco más lejos? ¡Por supuesto! Las baterías con certificado IATA son perfectas para viajar.

Ábrete camino con Empulse F55 y preocúpate sólo de disfrutar.



LA MOVILIDAD NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL

El potente motor eléctrico brushless (sin escobillas) y la tracción optimizada te ayudarán a hacer frente a casi cualquier terreno.

**SIN
LÍMITES**

POTENCIA

Equipada con batería de litio de 8.1 Ah que proporciona una autonomía aproximada de hasta 35 km. La batería cuenta, además, con un sistema inteligente que mejora el ciclo de carga y la vida útil de la misma.

TRACCIÓN

Es lo que más importa a la hora de hacer frente a pendientes pronunciadas. Empulse F55 te permite ajustar el centro de gravedad y optimizar la tracción.

TÚ DECIDES

Si quieres la rueda de 8.5" para maniobrar con tu Empulse F55 por la jungla urbana o prefieres disfrutar de un mayor confort en la conducción con la rueda de 14", ideal en naturaleza y terrenos irregulares.



PANTALLA

Toma el control gracias a la pantalla de fácil lectura: con indicador de la velocidad, distancia del viaje, distancia total recorrida, estado de la batería, consumo de energía...

CONDUCCIÓN CONFORTABLE

Gracias al ajuste de la posición del manillar.

ILUMINA TU CAMINO

Con la luz delantera LED incluida de serie.

IMPARABLE – A MENOS QUE TÚ QUIERAS

Con 2 sistemas de freno independientes para una mayor seguridad: freno eléctrico y un potente freno de disco.

A TU LADO CUANDO HACE FALTA – FÁCIL DE RETIRAR CUANDO NO LO NECESITES



ESTÁS A SOLO UNOS SEGUNDOS ...

... de vivir las más increíbles aventuras al aire libre. Con un sencillo sistema de anclajes, la handbike eléctrica Empulse F55 puede acoplarse a cualquier tipo de silla de ruedas en cuestión de segundos, convirtiéndose en el complemento más potente para tu día a día.



Empulse F55 para sillas con reposapiés desmontables

Con tubos de sub-armazón y manillar más largos (y curvados) para adaptarse mejor a las sillas con reposapiés desmontables, proporcionando una conducción ergonómica y confortable.



Empulse F55 para sillas con reposapiés fijos

Tubos de sub-armazón y manillar más corto que se adapta a la perfección a sillas con reposapiés fijos, aumentando la tracción y el confort en la conducción.

PREPÁRATE PARA SALIR




Gracias a la posibilidad de abatir el sub-armazón, el tamaño de transporte de tu Empulse F55 queda reducido en cuestión de segundos: abate hacia arriba el sub-armazón, baja el manillar, y podrás guardarla fácilmente. Si es necesario, el sub-armazón también puede desmontarse completamente.



PRESUME DE ESTILO

DETALLES
DE
COLOR



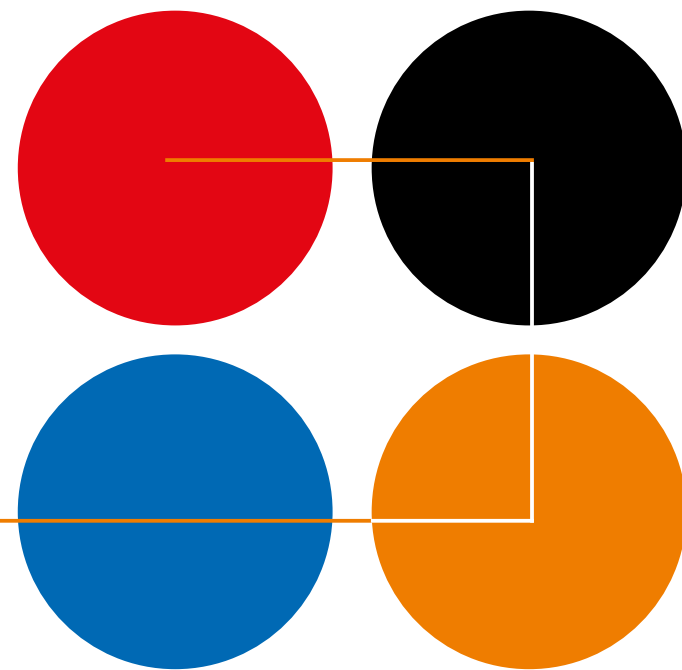

La individualización se hace posible gracias al kit para personalizar el color del guardabarros y los laterales de la F55. Muy fáciles de intercambiar, vienen de serie en cuatro colores: rojo, negro, azul y naranja.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Autonomía máx.	35 km*
Pendiente máx.	Hasta 11% (6°)
Anchura armazón frontal	260 a 480 mm ⁽¹⁾
Carga máx.	110 kg
Máx. velocidad hacia delante	6 km/h, 10 km/h, 15 km/h (según elección)
Tamaño de rueda	8,5" maciza (con cámara de aire) / 14" neumática
Batería	Litio-ion, 36V, 8.1 Ah
Motor	400 W Máx.
Peso de la batería	2 kg
Peso de transporte	9 kg
Peso del sub-armazón	2 kg
Peso total	Desde 13 kg
Freno	Doble freno: freno de disco mecánico y freno eléctrico independiente
Compatibilidad	Sillas rígidas / plegables Reposapiés fijos / desmontables
Color	Negro
Detalles de color (incluidos de serie)	Negro, rojo, azul y naranja (color negro montado de fábrica)

(1) Anchura del armazón medida de centro a centro del tubo del armazón en la posición de montaje. Utilice solo esta medida y no la anchura de asiento para comprobar la compatibilidad.

* La autonomía puede variar en función de la combinación handbike-tipo de silla. El peso del usuario, las condiciones del terreno, el uso y habilidad de conducción, así como las condiciones meteorológicas pueden afectar al rendimiento.

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm

 **Orto Medic Ltda.**
56-222698090 / 56-222698089
www.ortomedic.cl



Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

