


Silla de Baño pediátrica

Otter



Inspired
by drive

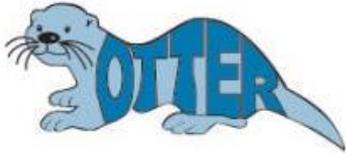

Cuán importante es el aseo de los niños, pero más importante es que sea seguro.

Tristemente los baños no siempre están adaptados para un aseo de forma segura para su hijo(a).

Presentamos la silla de Baño Otter, diseñada para un baño seguro. Fabricada en plástico, con hamaca de malla de secado rápido desmontable para lavado.

Posee cintas contenedoras de piernas y tronco, junto a soporte lateral de cabeza.

Sus 4 patas poseen una goma antideslizante y están diseñadas para encajar en los dos accesorios que dispone, una base enaltadora para tina y una base con ruedas para desplazamientos.



Características

Materiales de calidad

Silla duradera y ligera gracias a su chasis de plástico, Fácil de limpiar y mantener.

El tejido de la hamaca de la silla Otter se puede quitar fácilmente para lavarlo a máquina. Tacto suave.



Fáciles y rápidos ajustes

Tanto el asiento como el respaldo son regulables en ángulo de inclinación. 5 posiciones que permiten adaptar la silla Otter a las necesidades del niño y del asistente.

Los ajustes se pueden realizar con una sola mano gracias al sistema Uni-bars y sin necesidad de bajar al niño de la silla.



Las patas de la silla Otter son antideslizantes para proporcionar la máxima seguridad en la bañera o en la ducha, regulables en altura (hasta 18 cm.) que permiten ajustarlas a la altura que necesite el cuidador.



Plegable. Fácil de almacenar y transportar.



Correas ajustables

Sus correas de posicionamiento ajustables permiten que el niño se encuentre seguro y bien posicionado en el asiento. Se ajustan individualmente con cierres de velcro.

En la zona de las piernas que permiten la abducción y la aducción optimizando de esta forma el control postural. Sus dos correas de posicionamiento permiten que el niño se encuentre seguro en el asiento.



Soportes de cabeza regulables a lo alto y a lo ancho para mayor comodidad del niño en la silla. Pueden utilizarse también como soportes laterales.

Accesorios adicionales

Bases enaltadoras, se venden por separado:

Base con ruedas para ducha



De estructura metálica, añade 47 cm. de altura.
Sólo para tallas S M y L.

Base sin ruedas para tina



De estructura plástica, ajustable en altura, añade de 13 a 25 cm.
Sólo para tallas S M y L.



Especificaciones Técnicas

	S	M	L	XL
Estatura usuario (cm)	91	81 - 127	117 - 173	127 - 183
Capacidad de peso (kg)	27	54	72	113
Ancho de asiento (cm)	43	43	43	50
Profundidad de asiento (cm)	33	33	42	50
Altura de respaldo (cm)	46	63	81	86
Longitud total (cm)	81	95	122	152
Peso unidad (kg)	5	5,5	6,4	8

*Medidas aprox. \pm 2

www.ortomedic.cl
ventas@ortomedic.cl
Fono: 2698090 - 2698089
Julio Prado # 1665
Stgo. - Chile

